姓名:程礼彬 学号: 19300740005

实验时间: 单周周五 座位号: 127-2-1

- 一、实验题目:ABO 血型的鉴定和血涂片的观察
- 二、实验目的:
- **1.ABO 血型的鉴定:** 了解和掌握 ABO 血型系统及 ABO 血型鉴定的原理和方法
 - **2.血涂片的观察:**通过对血涂片的观察,了解和掌握血液的组成并分辨出各种不同血细胞的形态。在此基础上,了解血液中各部分细胞的功能。

三、实验原理:

1.ABO 血型:

ABO 血型是根据红细胞表面抗原(凝集原)来确定的。其中,红细胞只含 A 凝集原的,故称为 A 型,其血清中含有抗 B 凝集素;红细胞只含 B 凝集原的,称为 B 型,其血清中含有抗 A 凝集素;红细胞含有 A 和 B 两种凝集原的,称为 AB 型,其血清中既没有抗 A 凝集素也没有抗 B 凝集素;红细胞 A 和 B 两种凝集原都缺乏的,称为 0 型,则其血清中含有抗 A 和抗 B 凝集素。

2.血细胞的形态与功能:

- (1) 成熟的红细胞: 形状为双凹或单凹圆盘形,边缘较厚,中央较薄, 无成型细胞核。其主要功能一是运输氧和二氧化碳,二是 对机体所产生的酸碱物质其缓冲作用。主要成分为血红蛋 白。男性所含数量约 450~550 万个/mm³,女性所含数量 约 380~450 万个/mm³.
- (2) 白细胞: 其主要功能是保护机体、抵抗外来微生物的侵害。数量约为 4,000~10,000 /mm³。根据细胞核的形态、有无特殊的嗜色颗粒又可分为:
- i. 无粒细胞
 - a) 淋巴细胞(占比约 33%): 形状为胞体圆形或近圆形。细胞核呈圆形,偏于一侧浓染,染色质粗糙致密。细胞质很少。
 - b) 单核细胞(占比约 3-7%): 形状为圆形或椭圆形,体积最大。细胞核不分叶,呈心形、肾形或马蹄形。
- ii. 有粒细胞
 - a) 中性粒细胞(占比约 57-67%): 细胞核分 2-5 页

- b) 嗜酸性细胞(占比约1-3%):细胞质中为红色嗜酸性红色颗粒。细胞核分两页。
- c) 嗜碱性细胞(占比约 0-0.75%): 细胞质中充满大小、排列不均嗜碱性颗粒,呈灰蓝色。细胞核不明显。
- (3)血小板:形状一些呈椭圆形,也有少量呈梭形或不规则小颗粒。 主要功能为止血和凝血。


四、材料和用具:


- 1.材料:人外周血,血涂片
- 2.用具:普通光学显微镜,载玻片,盖玻片,采血针,无菌吸管,75%酒精棉球,记号笔。

五、 实验结果:

- 1. 主要步骤:
 - 1) 目镜——调节目镜使其适合自身瞳距
 - 2) 载物台——移动压片夹固定载玻片
 - 3) 低倍镜——使用移动器使切片位于视野中央,调节聚光镜使亮度适宜,调节粗准焦螺旋进行调焦
 - 4) 中倍镜——调节细准焦螺旋进行调焦
 - 5) 高倍镜——调节聚光镜使亮度适宜,调节细准焦螺旋进行调焦并对观察到的不同细胞进行记录
 - 6) 利用 Leica 摄像记录实验结果

2. 实验结果

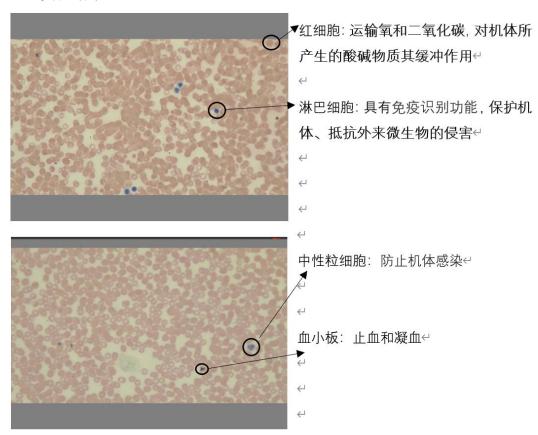

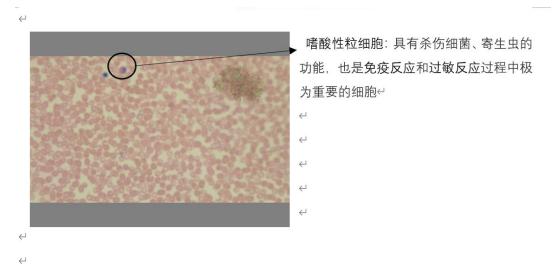

血型判断



与标准的 A、B 抗体分别混合后,A 出现凝集现象,B 未出现凝集现象,故可判断为 A 型血。